

Français



Sonic Boom Réveil double alarme avec vibreur et 5-niveaux variateur

Pour Modèle:
SBB500SS
SBB500SSBLK
SBB500SST / P / B / R
SBC575SS



avec le
mode de test
maintenez enfoncés
Snooze et Time 3
secondes

MODE D'EMPLOI

IMPORTANT – Veuillez lire attentivement cette notice et la conserver pour toute consultation ultérieure. Voir les instructions de fonctionnement au verso du document.

- Utilisez exclusivement l'adaptateur fourni ou recommandé Sonic Alert pour brancher l'unité.

Avertissement : pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Avant de raccorder l'appareil au réseau électrique, assurez-vous que les exigences spécifiées sur l'appareil correspondent à l'alimentation électrique disponible dans le pays, soit CA100-240V~, 50/60 Hz.

-- La ventilation ne doit pas être entravée, les orifices d'aération doivent rester libres de tout objet, tel que des journaux, des nappes, des rideaux, etc. ;

-- Aucune source de flamme nue, comme une bougie allumée ne doit être placée sur l'appareil.

-- L'appareil ne sera pas installé à proximité d'un dispositif qui goutte ou soumis à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide ne doit être placé sur l'appareil, tel qu'un vase par exemple.

-- Ne placez pas l'appareil dans un meuble fermé ou sur un rack ne disposant pas d'une ventilation adéquate.

-- Lorsque la fiche secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, celle-ci doit toujours être facilement accessible.

Mode de test :

- 1) Appuyez sur les boutons Snooze (rappel d'alarme) et Time (réglage de l'heure) et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de test. L'afficheur montre « 7ES7 » pour indiquer qu'il se trouve en mode TEST.
- 2) Si dans la minute qui suit, aucun bouton n'est pressé, il sortira du mode de test et reviendra en mode de réglage de l'heure.
- 3) En appuyant sur un bouton dans la minute qui suit (exception faite des boutons Snooze (rappel d'alarme) & Time (réglage de l'heure), qui n'ont aucun effet), l'appareil quittera immédiatement le mode de test.
- 4) Lorsque l'appareil se trouve en mode de test, faire glisser le commutateur de fonction qui permet d'afficher les différentes fonctions du réveil :
 - a) Si le commutateur de fonction se trouve sur OFF, un « BIP » retentira de manière continue pour indiquer que l'appareil se trouve en mode de test.
 - b) Si le commutateur de fonction se trouve sur BUZZ, il fera retentir l'avertisseur sonore.
 - c) Si le commutateur de fonction se trouve sur VIB, il fera retentir le vibreur.
 - d) Si le commutateur de fonction se trouve sur VIB & BUZZ, il fera retentir l'avertisseur sonore et le vibreur.
- 5) Une fois les opérations terminées dans le mode de test, appuyez sur un bouton quelconque (exception faite des boutons Snooze (rappel d'alarme) & Time (réglage de l'heure), qui n'ont aucun effet) pour quitter immédiatement le mode de test.

RÉVEIL AVEC COUSSIN VIBRANT Modèle SBB500SS-v3

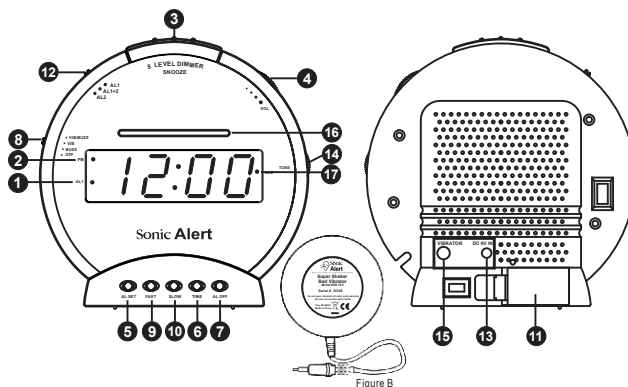


Figure B

Les caractéristiques du produit figurent dans le schéma ci-dessus :

- | | |
|---|--|
| 1) Indicateur d'alarme-1 (AL1) | 10) Bouton de défilement lent des min./ heures |
| 2) Indicateur PM | 11) Compartiment de la pile |
| 3) Bouton de rappel d'alarme/ Durée du rappel d'alarme/ Variateur | 12) Sélecteur d'alarme (AL1, AL2, AL1+AL2) |
| 4) Sélecteur rotatif du volume | 13) Alimentation d'entrée CC |
| 5) Bouton de RÉGLAGE / Durée de l'alarme | 14) Sélecteur rotatif du volume |
| 6) Commutateur de réglage de l'heure | 15) Entrée du vibreur/ Vibreur pour lit |
| 7) DÉSACTIVATION de l'alarme | 16) Écran clignotant |
| 8) Commutateur du mode Alarme | 17) Indicateur d'alarme-2 (AL2) |
| 9) Bouton de défilement rapide des min./ heures/ Sélecteur 12h. ou 24h. | |

Réglage correct de l'heure –

- 1) Appuyez sur le bouton « TIME » (heure) (6) et maintenez-le enfoncé, puis simultanément, appuyez sur le bouton « FAST » (défilement rapide) (9) ou sur le bouton « SLOW » (défilement lent) (10) pour faire défiler l'heure jusqu'au réglage voulu.
- 2) Un point lumineux (2) logé dans le coin supérieur gauche du réveil indique les heures de l'après-midi au format américain (12h). Pour les heures matinales (AM), le point lumineux ne s'allume pas.

Réglage de l'heure de déclenchement de l'alarme –

Réglage de l'alarme 1

- 1) Faites glisser le « SÉLECTIONNEUR D'ALARME » (12) sur la position AL1, l'indicateur d'alarme « AL1 » (1) s'allume.
- 2) Appuyez sur le bouton « RÉGLAGE de l'alarme (5) et maintenez-le enfoncé, puis simultanément, appuyez sur le bouton « FAST » (défilement rapide) (9) ou sur le bouton « SLOW » (défilement lent) (10) pour faire défiler les heures jusqu'au réglage d'alarme voulu.
- 3) Vérifiez que l'heure de déclenchement de l'alarme est correctement réglée pour le matin ou l'après-midi (1).

Réglage de l'alarme 2

- 4) Une fois l'alarme AL1 réglée, faites glisser le « SÉLECTIONNEUR D'ALARME » (12) sur la position AL2, l'indicateur d'alarme « AL2 » (17) s'allume..
- 5) Faites glisser le « SÉLECTIONNEUR D'ALARME » (12) sur la position AL2, l'indicateur d'alarme « AL2 » (17) s'allume.
- 6) Appuyez sur le bouton « RÉGLAGE de l'alarme (5) et maintenez-le enfoncé, puis simultanément, appuyez sur le bouton « FAST » (défilement rapide) (9) ou sur le bouton « SLOW » (défilement lent) (10) pour faire défiler les heures jusqu'au réglage d'alarme voulu.

Sélection du format 12 heures ou 24 heures

– Le réglage de l'heure par défaut est 24 heures pour Europe, Le réglage de l'heure par défaut est 12 heures pour UK, USA.

Appuyez sur le bouton **Fast (défilement rapide) (9)** et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes pour entrer en mode de sélection de l'heure. Relâchez le bouton **Fast (9)** lorsque l'écran affiche « 12 H » ou « 24 H ». Appuyez sur le bouton **Fast (9)** pour basculer entre les formats 12 heures et 24 heures. Si aucune sélection n'est faite dans les 4 secondes, le dernier format d'heure s'affichera et l'appareil reviendra en mode normal.

Alarme –

Activer les alarmes :

- 1) Pour activer l'alarme 1, faites glisser le « SÉLECTIONNEUR D'ALARME » (12) sur la position AL1. L'indicateur d'alarme « AL1 » (1) s'allume.
- 2) Pour activer l'alarme 2, faites glisser le « SÉLECTIONNEUR D'ALARME » (12) sur la position AL1. L'indicateur d'alarme « AL2 » (17) s'allume.

- 3) Pour activer les deux alarmes, faites glisser le « **SÉLECTIONNEUR D'ALARME** » (12) sur la position AL2, les indicateurs d'alarme « **AL1** » (1) et « **AL2** » (17) s'allument.

Pour sélectionner le mode de réveil –

Pour sélectionner le mode de réveil, faites glisser le « **commutateur du mode Alarme** » (8) vers la position souhaitée :-

- a) « **BUZZ** » pour le son
- b) « **VIB** » pour le vibreur de lit
- c) « **VIB/BUZZ** » pour aussi bien le son que le vibreur de lit

REMARQUE : une fois le mode de réveil choisi, il sera appliqué aux deux alarmes.

Modèles d'alarme –

Lorsque l'alarme est activée, le modèle d'alarme de l'avertisseur sonore / de l'affichage clignotant n'est pas synchronisé avec le vibreur. Cela signifie que lorsque l'avertisseur sonore / l'affichage clignotant est **ACTIVE**, le vibreur est **DÉSACTIVE** et lorsque l'avertisseur sonore / l'affichage clignotant est **DÉSACTIVE**, le vibreur est **ACTIVE**.

ALARME 1 - Lorsque l'alarme 1 est activée, 3 bips retentissent pour l'avertisseur sonore, puis pour le vibreur. Le modèle se répète jusqu'à ce que l'alarme soit arrêtée.

ALARME 2 - Lorsque l'alarme 2 est activée, 4 bips retentissent pour l'avertisseur sonore, puis pour le vibreur. Le modèle se répète jusqu'à ce que l'alarme soit arrêtée.

Régler la durée de l'alarme –

Le paramètre par défaut pour la durée de l'alarme est de 30 minutes ; vous pouvez régler ce paramètre entre 1 minute et 59 minutes. Pour régler la durée de l'alarme :

* Appuyez sur le bouton **AL. SET (réglage de l'alarme)** (5) puis maintenez-le enfoncé pendant six secondes. L'afficheur du réveil montrera la durée d'alarme par défaut sous la forme suivante : '30'. Relâchez le bouton de réglage de l'alarme.

* Appuyez sur le bouton « **SLOW** » (10) pour régler la durée de l'alarme sur la valeur souhaitée (entre 1 et 59 minutes).

* Lorsque l'afficheur indique la durée d'alarme souhaitée, l'appareil, après trois secondes, retourne en mode normal. Le nouveau paramètre de durée d'alarme devient la nouvelle valeur par défaut et restera en mémoire jusqu'à ce que vous le changiez à nouveau.

Fonctionnement du rappel d'alarme –

1) Lorsque l'alarme se déclenche le matin, vous pouvez appuyer sur le bouton **SNOOZE (rappel d'alarme)** (3) pour l'arrêter temporairement. L'alarme s'arrêtera pendant 7 minutes ou pendant la durée sélectionnée (entre 1 et 30 minutes), puis se réenclenchera. L'opération peut être répétée indéfiniment jusqu'à ce que l'alarme soit arrêtée.

2) La fonction **SNOOZE (rappel d'alarme)** des alarmes 1 et 2 est indépendante d'une alarme à l'autre.

Réglage de la durée du rappel d'alarme –

Le paramètre par défaut pour la durée du rappel d'alarme est de 7 minutes, mais vous pouvez régler ce paramètre entre 1 minute et 30 minutes. Pour régler la durée du rappel d'alarme :

* Appuyez sur le bouton **SNOOZE (rappel d'alarme)** (3) et maintenez-le enfoncé pendant quatre secondes. L'afficheur du réveil indiquera la durée d'alarme par défaut sous la forme suivante : '7'. Relâchez le bouton de rappel d'alarme.

* Appuyez sur le bouton « **SLOW** » (**défilement lent**) (10) pour régler la durée du rappel d'alarme sur la valeur souhaitée (entre 1 et 30 minutes).

* Lorsque l'afficheur indique la durée du rappel d'alarme souhaitée, l'appareil, après trois secondes, retourne en mode normal. Le nouveau paramètre de la durée du rappel d'alarme devient la nouvelle valeur par défaut et restera en mémoire jusqu'à ce que vous le changiez à nouveau.

Arrêter l'alarme –

L'alarme peut être arrêtée temporairement pour la journée ou de manière permanente.

1) Lorsque l'alarme s'arrête, appuyez sur le bouton « **ALARM OFF** »

(**DÉSACTIVATION de l'alarme**) (7). L'alarme se désactive automatiquement pour la journée et sera réactivée le lendemain à la même heure si le paramètre de l'alarme n'est pas modifié.

2) Pour arrêter définitivement l'alarme, faites glisser vers le bas le « **Commutateur du mode Alarme** » (8) jusqu'à la position OFF. L'alarme ne sera pas réactivée tant que le « **commutateur du mode Alarme** » (8) n'aura pas été repositionné sur l'une des positions « **VIB** », « **BUZZ** » ou « **VIB/BUZZ** ».

REMARQUE: la fonction de désactivation des alarmes 1 et 2 est indépendante d'une alarme à l'autre.

Fonctionnement du variateur –

Il existe un réglage de la luminosité à 5 niveaux pour l'affichage DEL. Appuyez une fois sur le bouton de **RAPPEL D'ALARME** pour modifier la luminosité de l'écran. La luminosité suivra le cycle suivant en partant de 5-4-3-2-1-2-3-4-5 (de claire à sombre, puis de sombre à claire).

***REMARQUE** *: la fonction du variateur ne marche pas lorsque le réveil se trouve en mode de rappel d'alarme.

Réglage du volume –

1) Pour régler le volume, faites pivoter la **molette de VOLUME** (4) qui se trouve sur le coin inférieur droit du réveil.

Réglage de la tonalité –

1) Pour régler la TONALITE, faites pivoter la **molette de TONALITE** (10) qui se trouve sur le coin supérieur droit du réveil.

Vibreur pour lit / vibrateur –

1) Fixez le connecteur du vibreur pour lit au dos du réveil, sur « l'entrée du **VIBRATEUR** » (15).

2) Pour activer le vibreur, faites glisser le « **commutateur du mode Alarme** » (8) sur la

position « **VIB/BUZZ** » ou « **VIB** ».

3) Placez le vibreur entre le matelas et le sommier.

Batterie de secours –

Afin d'utiliser la batterie de secours, vous pouvez installer une pile alcaline de 9-volts au dos du réveil, sous le couvercle du logement de la pile (11). La pile doit être achetée séparément. **Veillez noter que lors d'une panne de courant l'écran DEL n'affiche pas l'heure, mais l'horloge continue de fonctionner et affichera l'heure correcte dès le retour du courant électrique.** Lors d'une coupure de courant, la pile alcaline ne peut faire fonctionner que l'IC du réveil et ceci jusqu'à un maximum de 30 jours. (**Lors d'une coupure électrique, l'afficheur DEL ne montre pas l'heure.**)

REMARQUE : pour des résultats optimaux, il est recommandé de changer la batterie tous les 6-8 mois. Si le réveil n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de retirer la pile afin d'éviter les fuites d'acide susceptibles de l'endommager.

Alimentation d'entrée CC 9V –

Fixez « **L'ENTRÉE D'ALIMENTATION CC** » (13) sur l'arrière de DC9V IN à proximité de « **L'ENTRÉE DU VIBRATEUR** » (15) ; il s'agit de l'entrée la plus petite des deux.

REMARQUE : **IMPORTANT** : ne confondez pas « **L'ENTRÉE D'ALIMENTATION CC** » (13) et « **L'ENTRÉE DU VIBRATEUR** » (15).

INFORMATIONS GÉNÉRALES –

Adaptateur secteur homologué UL : CA100-240V~, 50/60Hz

Consommation électrique : sortie de l'adaptateur : CC9V --- 0,65A / 5,85W

	ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LA FACE ARRIÈRE) DU PRODUIT. AUCUNE PIÈCE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR SONIC ALERT.	
Le triangle montrant un éclair en forme de flèche est un symbole d'avertissement indiquant la présence d'une tension élevée à l'intérieur du produit.		Le triangle contenant un point d'exclamation est un symbole d'avertissement afin d'attirer votre attention sur les instructions importantes fournies avec le produit.

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

La fonction normale peut être affectée par de fortes interférences électromagnétiques (à partir d'autres appareils). Si cela se produit, essayez de déplacer l'appareil vers un autre emplacement. La fonction normale devrait reprendre, mais vous devrez peut-être réinitialiser l'unité en suivant la procédure décrite dans le manuel d'instructions.

RECOMMANDATIONS POUR LE RECYCLAGE

La directive DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) a été mise en place dans le but d'assurer la collecte sélective en vue de la valorisation, réutilisation ou recyclage des produits en fin de vie. Lorsque votre produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas dans votre poubelle ménagère.

Suivez l'une des procédures décrites ci-dessous :

- Déposez les piles et votre ancien appareil dans un lieu de collecte approprié.

- Ou rapportez votre ancien appareil chez le distributeur qui vous vendra le nouveau. Il devra l'accepter. Ainsi, si vous respectez ces instructions vous faites un geste pour l'environnement et vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.

CE DECLARATION : Ce produit respecte les exigences demandées par la directive européenne tel que la directive Compatibilité électromagnétique (EMC) 2014/30/EC et la directive basse tension (LVD) 2014/35/EC. (Si applicable).

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : www.geemarc.com

GARANTIE LIMITÉE DEUX ANS SUR LE PRODUIT SONIC ALERT

Le réveil Sonic Alert est garanti pendant deux (2) ans, à compter de sa date d'achat. La garantie ne couvre pas les accidents, les pièces cassées, les liquides renversés, ni la négligence de l'utilisateur. La garantie Sonic Alert ne limite en aucun cas les droits que vous accorde la loi. Le produit est couvert par la garantie légale de conformité telle que prévue par la réglementation applicable.

Important: votre facture d'achat est un élément essentiel de votre garantie. elle vous sera demandée en cas d'intervention sous garantie.

Geemarc Telecom: SAV au 0328587599

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59791 Grande Synthe Cedex, FRANCE



Consulter notre site Internet pour obtenir la notice détaillée ou des informations et de l'aide sur nos produits : www.geemarc.com

Email: sav@geemarc.fr Téléphone: 03 28 58 75 99

Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59791 Grande-Synthe, France
Manufacturier: Sonic Alert 850 Stephenson Hwy., Suite 323, Troy MI

Produit fabriqué en Chine pour Geemarc Telecom